

ウイングド シュアカン

NEW
325psi
PVCフリー




WINGED SURECAN®

TORAY
Innovation by Chemistry

東レ・メディカル株式会社

刃先形状

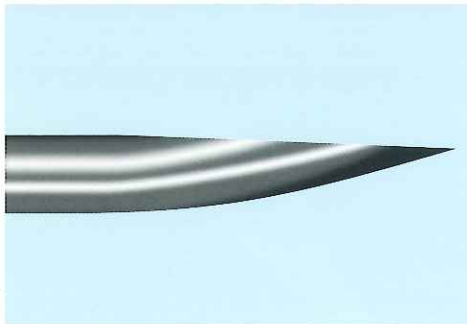

モディファイド リア カutting エッジ


- 皮下用ポート専用に設計された刃先形状(針自体を曲げずにノンコアリング化)により、セプタムの損傷を抑える優しい構造です。
- 針先を曲げずにノンコアリングしていることから、直進性に優れ、針開口部がセプタム内に遺残しにくくなっています。
- モディファイド リア カutting エッジを施しているため、皮下用ポートのセプタム穿刺時に針先のアゴ(エッジ部)でセプタムが削れにくくなっています。

延長チューブ



Y-SITE付

翼状部

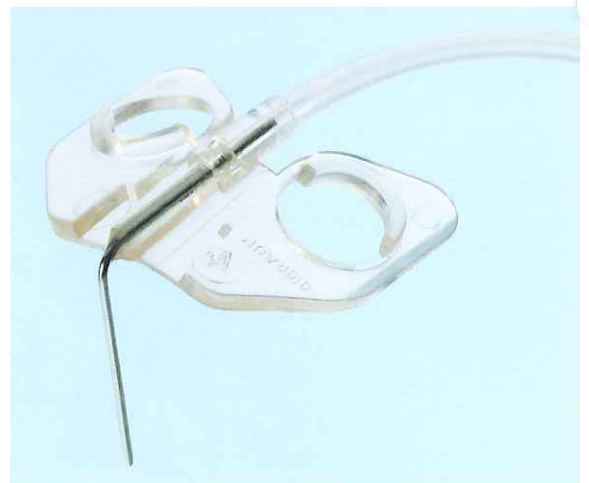

ポリウレタン製のチューブを使用しているため、塩化ビニル製等のチューブと比べ耐薬品性に優れ、可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)等の溶出がありません。

当社独自の形状で、把持し易く固定性にも優れています。

【製品仕様】

カタログNo.	針サイズ	針有効長		入数		耐圧
4448375	(0.71mm) 22G	12mm(1/2inch)	チューブ長150mm	15本/箱	4箱/ケース	325psi
4448383	(0.71mm) 22G	15mm(3/5inch)	チューブ長150mm	15本/箱	4箱/ケース	
4448800	(0.71mm) 22G	15mm(3/5inch)	チューブ長350mm	15本/箱	4箱/ケース	
4448391	(0.71mm) 22G	20mm(4/5inch)	チューブ長150mm	15本/箱	4箱/ケース	
4448405	(0.71mm) 22G	25mm(1inch)	チューブ長150mm	15本/箱	4箱/ケース	
4448332	(0.89mm) 20G	15mm(3/5inch)	チューブ長150mm	15本/箱	4箱/ケース	
4448529	(0.71mm) 22G	15mm(3/5inch)	Y-SITE付	15本/箱	4箱/ケース	非対応
4448537	(0.71mm) 22G	20mm(4/5inch)	Y-SITE付	15本/箱	4箱/ケース	

ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

*Y-SITE付(イソブレンゴム);メインフローに加え、側注が可能です。

発売元

東レ・メディカル株式会社

札幌: ☎060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2 (札幌泉第2ビル) TEL. (011) 251-2233
 仙台: ☎981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL. (022) 772-5773
 東京: ☎101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 (龍角散ビル) TEL. (03) 5835-2761
 名古屋: ☎481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL. (0568) 21-5600
 大阪: ☎541-0059 大阪府中央区博労町4-2-15 (ヨドコウ第2ビル) TEL. (06) 6253-7002
 福岡: ☎838-0138 福岡県小郡市寺福童30-1 TEL. (0942) 73-3900

製造販売元

ビー・ブラウン エースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16 JEl本郷ビル