

東レ・メディカル株式会社

CrossWinder[®] NX
マイクロガイドワイヤー クロスワインダー[®] NX

NEW EXPERIENCE



末梢血管へのアクセス性と操作性に配慮した、
IVR治療分野向けマイクロガイドワイヤー

先端シェイピング & リシェイピング性能

先端ナイチノールコアを採用し、
シェイピング性および形状保持性に配慮した設計としています。
微細で屈曲した末梢血管へのアプローチをサポートするとともに、
耐キンク性も有します。


ハイブリッドコア採用

SUS × Ni-Ti

先端柔軟性とトルク性能の両立を目指し、手元部にはステンレスコア、
遠位部にはナイチノールコアを採用しています。
異なる金属をシームレスに接合したコア構造を有し、
末梢血管へのアプローチに配慮した設計です。

トリアキシャルシステムに対応する長さ

有効長155、160cmの孫カテーテルにも対応する全長210cm。

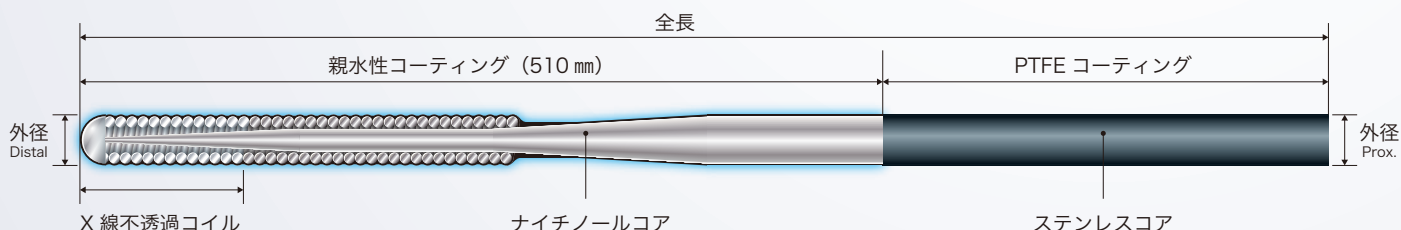

仕様

商品コード	タイプ	外径		X線不透過長	全長	先端形状	JANコード
		Distal	Prox.				
YGW14-ST21	0.014 inch	0.014 inch	0.014 inch	50 mm	2,100 mm	ストレート (シェイパブル)	4595431999017
YGW16-ST21	0.016 inch	0.014 inch	0.016 inch				4595431999024

販売名 YKWガイドワイヤー 一般名称 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤー
医療機器承認番号 30700BZX00280000
特定保険医療材料機能区分 012 血管造影用ガイドワイヤー (2)微細血管用



ご使用前に電子化された添付文書をお読みください

▶ 販売業者 東レ・メディカル株式会社

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌第2ビル) TEL：011-251-2233
仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL：022-772-5773
東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL：03-5835-2762
名古屋：〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL：0568-21-5600
大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL：06-6253-7002
中四国：〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL：082-544-2761
九州：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL：092-477-3016

▶ 製造販売業者 株式会社ヨコオ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目25番地 JR神田万世橋ビル14階

▶ 代理店