




親水性ポリマーコーティングタイプ

Guidewire

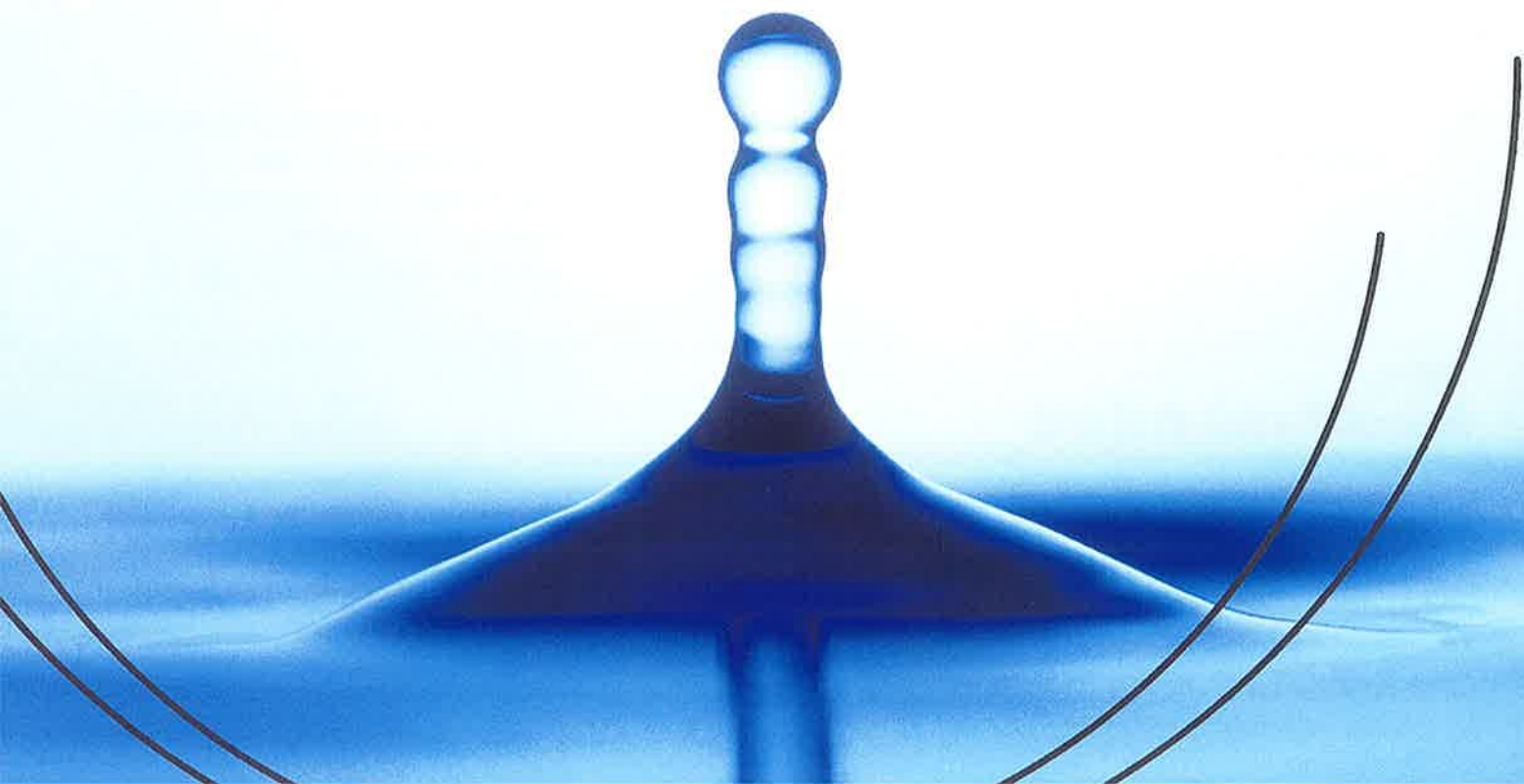

● **ガイドワイヤー操作性**

耐キンク性に優れた加工硬化型Ni-Ti合金を芯線に使用していますので、ガイドワイヤー先端に手元の回転操作が確実に伝わります。

● **表面潤滑性**

表面にコーティングされた親水性ポリマーが血液や生理食塩水に濡れると優れた潤滑性を発揮します。

● **造影性**

造影剤を含むポリマージャケットにより優れたX線不透過性があります。また、先端から2mmには金マーカーが付いており、先端部の視認性に優れています。

● **製品スペック表**

微細血管用

カタログNo.	外径	先端形状	全長	先端柔軟長	用途
FGW14-ST16S30	0.014*(0.37mm)	ストレート	160cm	30cm	マイクロ用
FGW16-ST16S30	0.016*(0.40mm)	ストレート	160cm		
FGW18-ST16S30	0.018*(0.47mm)	ストレート	160cm		
FGW18-ST18S30	0.018*(0.47mm)	ストレート	180cm		
FGW18-AG10	0.018*(0.47mm)	アングル	100cm	3cm	PTA用
FGW18-AG15	0.018*(0.47mm)	アングル	150cm		

一般用/交換用

カタログNo.	外径	先端形状	全長	先端柔軟長	用途
FGW25-AG15	0.025*(0.64mm)	アングル	150cm	3cm	一般用
FGW32-15J15	0.032*(0.81mm)	1.5mmJ	150cm		一般用
FGW32-3J20	0.032*(0.81mm)	3mmJ	200cm		交換用
FGW35-AG15	0.035*(0.89mm)	アングル	150cm		一般用
FGW35-2BK15	0.035*(0.89mm)	BEAK型	150cm		一般用
FGW35-AG17	0.035*(0.89mm)	アングル	178cm		一般用
FGW35-AG20	0.035*(0.89mm)	アングル	200cm		交換用
FGW38-AG15	0.038*(0.97mm)	アングル	150cm		一般用

※上記以外の商品については、お問い合わせ下さい。

- **包装: 微細血管用 1本/ケース**
一般用・交換用 5本/ケース

● **エチオレンオキサイドガス滅菌済み**

● **注意事項**

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読下さい。
- 2)本品は医療用ディスプレイ製品ですので、1回限りの使用にして下さい。
- 3)包装が破損または汚損している場合や製品に破損などの異常が認められる場合には使用しないで下さい。
- 4)水濡れ、高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。

● **型番の内容**

例)0.035"、150cm、アングル、先端柔軟長3cm、金マーカー有

→ FGW 35 - AG 15
① ② ③

①外径を示す
25→0.025"
32→0.032"
35→0.035"
38→0.038"

③長さを示す
15→150cm
18→180cm
20→200cm
22→220cm
26→260cm
30→300cm

②形状を示す
ST →ストレート
AG →アングル
15J →1.5mmJ
3J →3mmJ

医療機器承認番号 20800BZZ00046000

高度管理医療機器(クラス分類Ⅳ)

心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤー

JMDNコード: 350941114

販売名: ガイドワイヤー

[発売元]

東レ・メディカル株式会社

札幌: ☎060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL(011)251-2233
 仙台: ☎981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL(022)772-5773
 東京: ☎101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL(03)5835-2761
 名古屋: ☎481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL(0568)21-5600
 大阪: ☎541-0059 大阪府中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL(06)6253-7008
 広島: ☎731-0124 広島市安佐南区大町東4-12-1(グリーンコート毘沙門) TEL(082)831-1182
 九州: ☎838-0138 福岡県小郡市寺福重30-1 TEL(0942)73-3900

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647