



ディスポーザブル脊椎麻酔針  
**麻酔針**

**K-3ポイント**

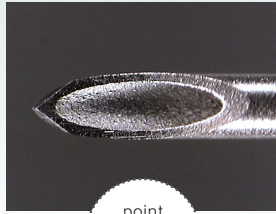

point  
**1**

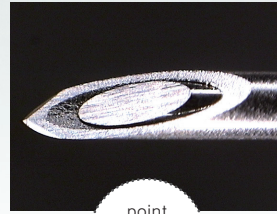

point  
**2**



point  
**3**

三面カットの刃先はスムーズな穿刺と適度な穿刺抵抗を両立し、確実な硬膜穿刺をサポートします。内腔を大きく確保することにより、髄液の逆流をすばやく確認できます。

外針とスタイレットの刃先が正確に一致していますので、コアリングを最小限にとどめることができます。

針基部は透明で逆流した髄液の確認を容易にしています。

商品コード	規格	ISOカラーコード	ガイド針	入数	
02 01 22 070S	22G×70mm	ブラック	無	25本×2箱 (50本/ケース)	
02 01 22 090S	22G×90mm				
02 01 23 070S	23G×70mm	ブルー			
02 01 23 090S	23G×90mm				
02 01 25 070S	25G×70mm	オレンジ			
02 01 25 090S	25G×90mm				
02 01 26 070S	26G×70mm	ブラウン			
02 01 27 070S	27G×70mm	グレー			無
02 01 27 090S	27G×90mm				
02 02 27 070S	27G×70mm				ガイド針付き

販売名:麻酔針  
承認番号:21000BZZ00448000

※ご使用の際には必ず添付文書をお読みください。  
※予告なしに製品仕様の一部を変更する場合がございます。予めご了承ください。

販売元

**東レ・メディカル株式会社**

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)  
仙台 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3  
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)  
名古屋 〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173  
大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)  
広島 〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)  
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

製造販売元

**ドクタージャパン株式会社**

埼玉県行田市長野 4-15-1

代理店