


サンスター®

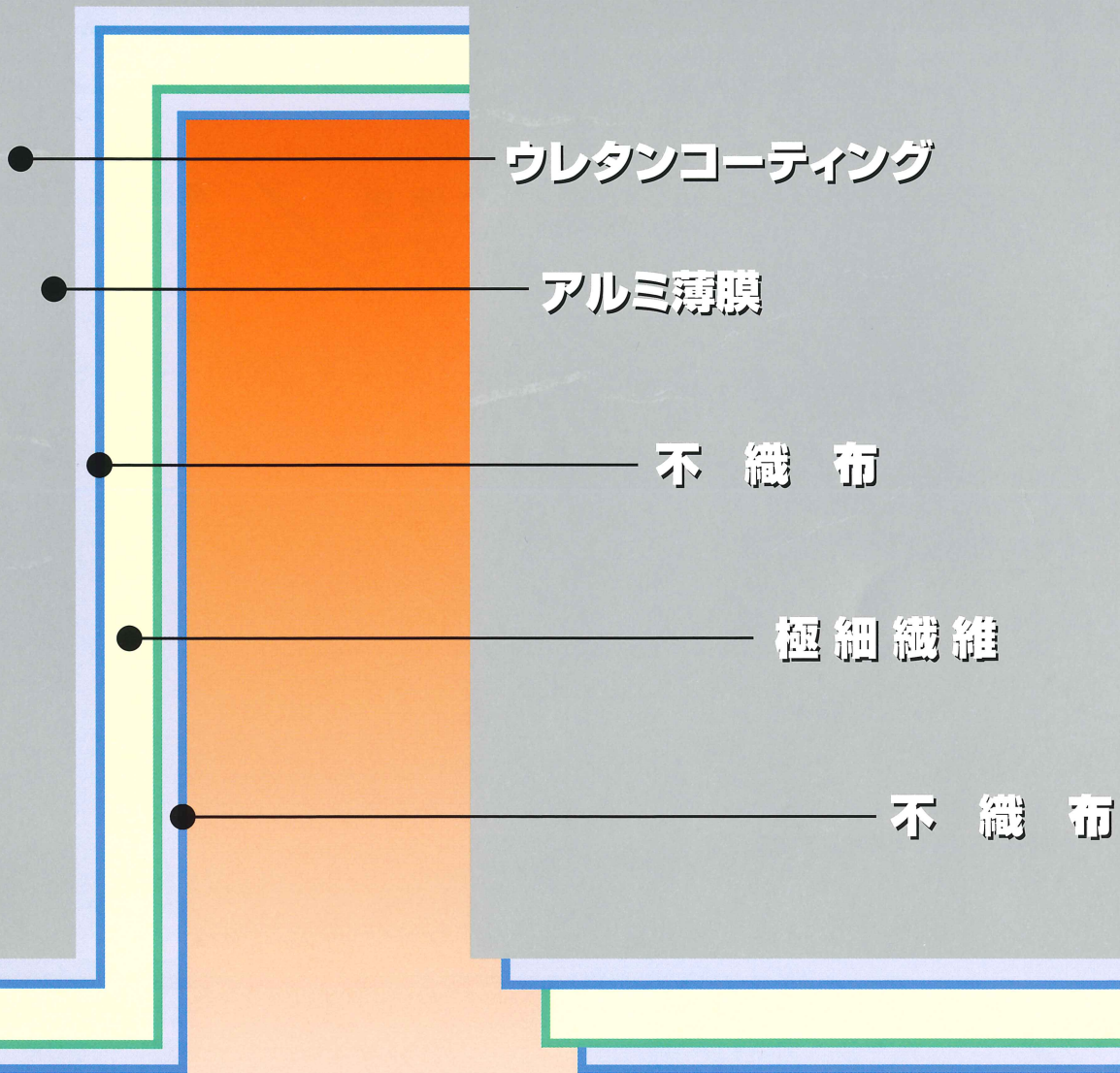


保温覆布

ポリエステル極細繊維とアルミ薄膜が 保温効果を高めます。

特長

- 東レサステート®は極細繊維が、空気の層を極めて小さく区分し、暖まった空気を逃がさないようにしています。
- 表面に400オングストローム(4/100,000mm)のアルミ薄膜をつけ、人体からの輻射熱(放熱)を反射して熱移動を防ぎ、保温力を高めます。
- 柔らかな風合いと、しなやかなドレープ性があります。
- 不織布を構成している短繊維どうしを接着させているため、発塵の発生を抑えます。また、防水性にも優れています。

構造

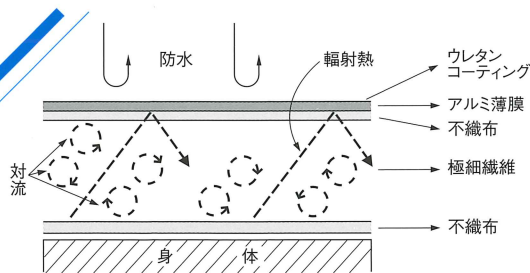


使用方法

- 患者体表を直接覆ってください。
- 不織布面を内側にして、ご使用ください。

東レテクノマ(人工気象室)における昇温および降温挙動実験

- なし**：発熱体に覆布を掛けないblank状態の発熱体表面温度。
- あり**：発熱体にそれぞれの覆布を掛けたときの発熱体表面温度。
- 切電**：発熱体にそれぞれの覆布を掛け、発熱電源を切ったときの発熱体表面温度。

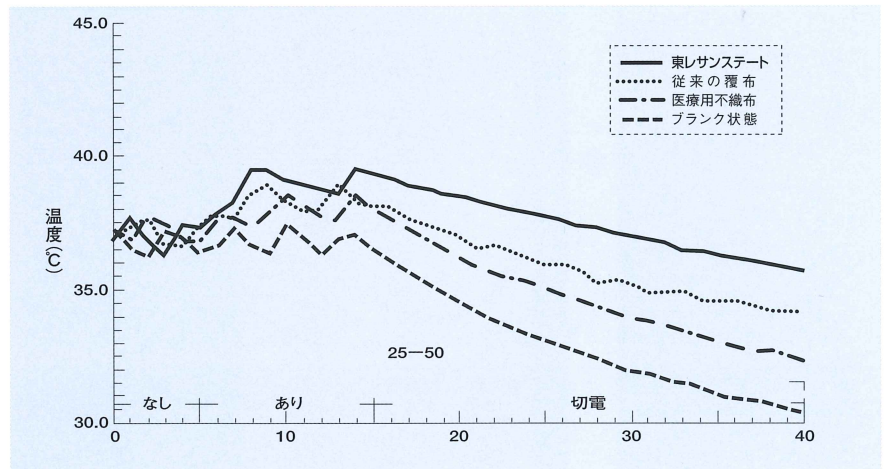

品種表

カタログNo.	規格	包装
S123	123×80cm	20枚/箱
S040	40×80cm	30枚/箱
S500	123×500cm	2ロール

ご使用上の注意

- 未滅菌品のため、清潔区域に直接使用しないで下さい。
- 乾燥した状態でご使用下さい。

販売元

東レ・メディカル株式会社

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233
 仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷川1-5-3 TEL.(022)772-5773
 東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2761
 名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600
 大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL.(06)6253-7002
 福岡：〒838-0138 福岡県小郡市寺福童30-1 TEL.(0942)73-3900